

三次元画像可視化システム

VOLUME EXTRACTOR

ボリューム エクストラクター

使いやすさアップ!

Version 3.5.0.3

バージョンアップ内容

- 2D 等高線表示の改良
等値面ダイアログの 2D 画像表示において、ウィンドウレベル機能の使用が可能になりました。(図 1)
- メッセージ機能の強化
DICOM インポートの際、Image Orientation タグの数値が小数点の画像と、JPEG2000 の圧縮画像に対して、メッセージを表示するようにしました。(図 2、図 3)
- その他バグフィックス
画像処理フィルタの表示が更新されないバグを修正しました。

カスタマイズサービス

日常業務等でお悩みの場合、何でもお気軽にご相談ください!

- ・ 画像処理フィルタの作成
- ・ 処理の自動化
- ・ パラメータ設定
- ・ プログラム開発
- ・ 3D プリンタ用造形モデル作成
- ・ CG/画像処理/WEB etc.

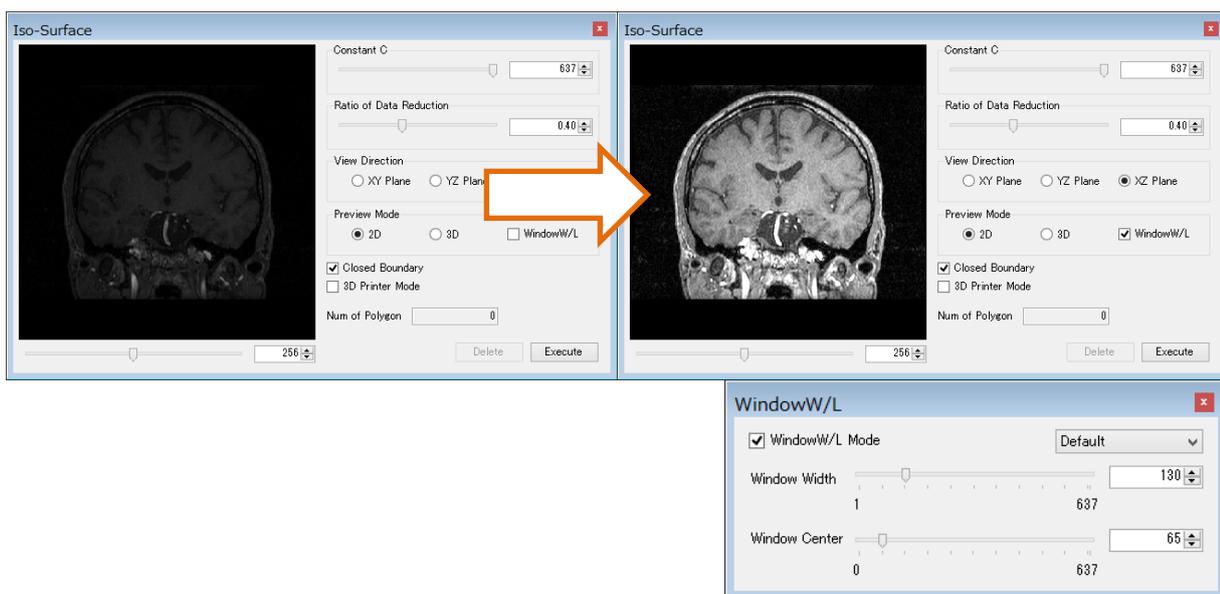


図 1 等値面ダイアログの 2D ウィンドウレベル表示 (左 : OFF、右 : ON)

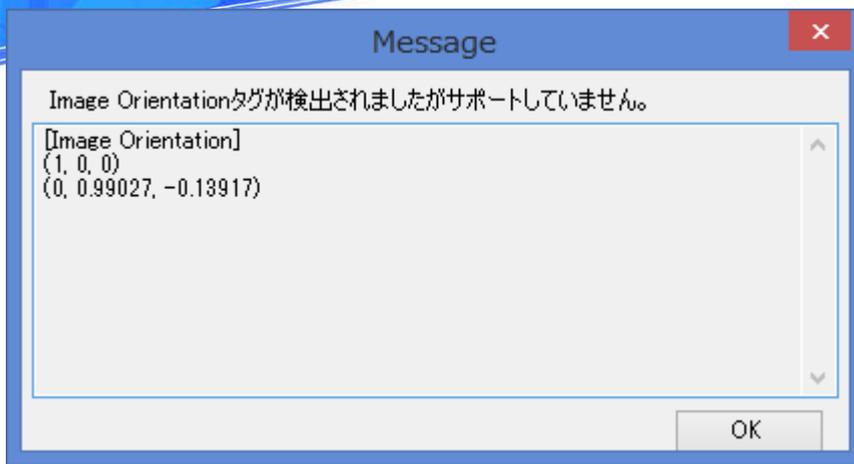


図2 Image Orientation タグのメッセージ表示



図3 Jpeg2000 圧縮 DICOM のメッセージ表示